


# MASCARILLA DE ALTA FILTRACIÓN DE SUJETAR CON ELÁSTICO Y CINTAS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




La eficiencia de filtración Bacteriana (EFB) es el porcentaje de eficiencia de la mascarilla para filtrar *microorganismos*. La eficiencia de la mascarilla es > 99.9%  
Filtración certificada por NELSON LABORATORIES TX 373145A.

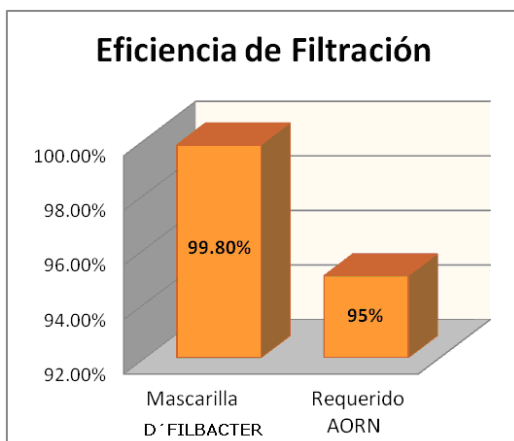

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. La mascarilla para procedimientos FILBACTER es diseñada usando materiales livianos para facilitar su respirabilidad y proveer más comodidad y frescura.
2. Minimiza la retención del calor de la respiración y reduce la posibilidad de irritación de la piel.
3. La mascarilla también posee una pieza nasal recubierta la cual se ajusta perfectamente al arco nasal para prevenir un posible efecto de escape o penetración.
4. El diseño plegado permite el cubrimiento total facial, para sujetar con elásticos resistentes suaves y confortables.
5. Todas estas características se combinan para ofrecerle una mascarilla liviana fresca cómoda y segura.

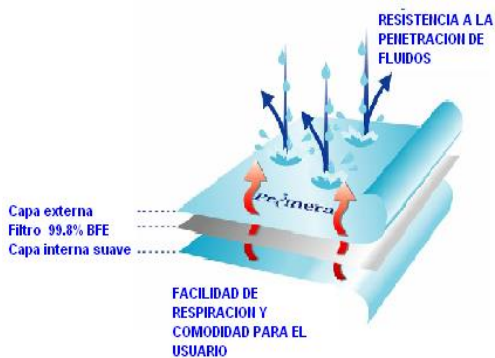

## MASCARILLA CON TRES CAPAS

- 1- Capa Externa resistente a penetración de fluidos (Azul).
- 2- Filtro que proporciona una eficacia de filtración > 99.9% Para partículas de 3.0 Micrón
- 3- Capa Blanca) interna suave en contacto con la piel.

<u>REFERENCIA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRESENTACION</u>
1410	Mascarilla para procedimiento	CAJA X 50 UNID
1408	Mascarilla de cuatro tiras de amarre	CAJA X 50 UNID

# MASCARILLA DE ALTA FILTRACIÓN DE SUJETAR CON ELÁSTICO Y CINTAS.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCION	MATERIAL	NOMBRE TECNICO
CAPA EXTERNA	POLIPROPILENO AZUL 15 GRS	SPUNBOND
CAPA MEDIA	FILTRO BLANCO DE 20 GRS	MELTBLOWN
CAPA INTERNA	POLIPROPILENO BLANCO 30 GRS	SPUNBOND
ALAMBRE	RECUBIERTO PLASTICO CAL.24	PLASTIC SPOOLED
ELASTICO	TEJIDO ALGODÓN-LYCRA	LYCRA

### ESTANDARES DE CALIDAD.

REQUISITO	MINIMO	MAXIMO	CONTROL DE ANALISIS
Largo de la mascarilla	178 mm	182 mm	INTERNO
Ancho de la mascarilla	90 mm	92 mm	INTERNO
Longitud del elástico	150 mm	170 mm	INTERNO
Longitud de tiras de amarre	1850mm	1900mm	INTERNO
Longitud del alambre	100 mm	110 mm	INTERNO
Pliegues	3	3	INTERNO
Color	N / A	N / A	INTERNO
Test microbiológico	1700 cfu	2700 cfu	NELSON LABORATORIES

### CALIDAD VISUAL.

La mascarilla no tendrá defectos que puedan afectar el uso normal.

1. Selle de ultrasonido completo
2. Alambre bien posicionado y sellado
3. Elástico bien sellado, uniforme en sus medidas, limpio y sin adhesivos.
4. Cuerpo sin perforaciones y limpias.
5. Pliegues bien sellados y uniformes
6. Empaque optimo.

### LISTADO DE PRODUCTOS.

MASCARILLA DE ALTA FILTRACION > 99.9 % BFE DE ELASTICOS Y DE AMARRAR.	FIL BACTER PREMIUM
---	--------------------